



消除寻常疣和跖疣的治疗方法

### A.适应症

Trosyd Wortie®脱疣疗法是一种治疗寻常疣和跖疣的非处方产品，适用于4岁以上的患者。

### B.Trosyd Wortie消除手足疣疗法的内含物

一个50毫升液态压缩二甲醚气体的加压罐，配备金属尖端，用于局部冻结疣体。本说明书描述了产品的功能和用法，并且包含警告和使用限制。

### C.关于疣体的基本信息

**寻常疣(俗称“水猴子”)**经常发生在手指或手背、肘部、膝盖和脚趾上部。寻常疣通常表现为粗糙的“马赛克”表面。疣病毒具有极强的传染性，可以通过直接接触受感染的皮肤在人与人之间或身体的某个部位传播。

**跖疣**与寻常疣类似，但它们只发生在脚底或脚趾下。一般来说，它们会产生疼痛感，通常表现为一小圈白色的皮肤，中间有黑点。跖疣也具有传染性，可以通过接触潮湿或湿润的表面，如地板，在人与人之间传播。

### D.Trosyd Wortie如何起效

- Trosyd Wortie®可以冻结寻常疣和跖疣。当冷敷器被按压(应用)到疣体上时，几秒钟内会开始冻结，皮肤变白。冻结会导致轻微的疼痛、刺痛和/或烧灼感。一旦取下冷敷器，受到治疗的区域将恢复其最初的颜色，疼痛/瘙痒的感觉将迅速减弱，在几小时内消失。
- 一旦治疗部位恢复正常颜色，可能会出现与冷冻部位相同大小的红斑。在某些情况下，由于冷冻的关系，在几天内可能在疣体下形成水泡(有时里面有血)。但这并不常见。
- 大约10-14天后，冰冻处的皮肤会和未处理过的疣体一起剥落。同时，在水泡下会形成一层新的皮肤。

将用于去除疣体的Trosyd Wortie与其他冷冻治疗产品进行过对比，以评估其冷冻能力。结果可以在下面的图片中看到。

有针对性的冻结治疗



### E.在使用Trosyd Wortie之前，需要了解的事项


- 不要将Trosyd Wortie用于面部、腋下、胸部、痣或胎记、正在长毛的疣、生殖器疣(阴茎或阴道部位)、粘膜(如口、鼻、肛门、生殖器、嘴唇、耳朵或眼睛附近)上。
- 如果不能清楚地识别要治疗的疣体，请不要使用Trosyd Wortie
- 如果不能清楚地阅读罐体或本说明书上的信息，请不要使用Trosyd Wortie。
- 请勿用于4岁以下的儿童
- 如果用于儿童，出于安全考虑，必须始终由成年人操作。

### F.如何使用Trosyd Wortie

- 按照G点中的说明，将Trosyd Wortie在疣体上使用1次
- 认真遵守本说明书中的指示是很重要的。使用不当可能会造成永久性的皮肤损伤，由于液化气体的过度冷冻或泄漏，可能会导致疤痕或神经损伤。
- 在大多数情况下，每个疣体治疗一次就已足够。如果使用三次后仍未改善，请咨询医生
  - 在使用Trosyd Wortie后，等待14天，让疣体脱落。如果在这段时间内疣体没有变化，可以再次使用Trosyd Wortie。
  - 两次的使用间隔一定要等待14天。
  - 每次使用后，用浸有酒精的小布块清洁冷敷器。
  - 每次使用后，让金属尖端达到室温，然后再重新使用，用于其他疣体。

### G.使用说明

为安全而有效地使用，必须精准地遵守说明书中指出的时间。强烈建议在使用Trosyd Wortie之前，准备一个计时器，并完全阅读说明书。

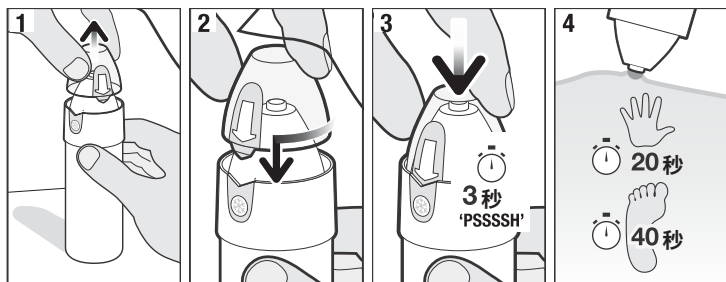

清洁尖端并将盖子盖回封闭位置，等待14天后疣体脱落。

#### 用于寻常疣和跖疣

1. 拿掉盖子，把罐子放在桌子或平面上

### 一次使用立即见效!

- 使用简单
- 不损伤周围皮肤
- 适用于4岁以上的儿童

2. 将罐体竖起来;箭头要对准罐体上的晶体符号，再盖上盖子。
3. 按住瓶盖3秒(不要超过3秒)，会听到喷气的声音(嘶嘶声)
4. 将冷冻的金属尖端准确地对准手上的疣体上20秒，脚上的疣体上40秒。

### H.防范措施

以下情况，请不要使用Trosyd Wortie:

- 在使用过程中，罐体没有处于平坦表面上
- 在使用过程中，没有听到“嘶嘶”声(气溶胶释放声)，和/或
- 使用后，“嘶嘶声”持续存在，和/或
- 使用后尖端没有冷却(金属尖端上应出现一层“冰层”)。

如果上述的一个或多个条件不满足，无法保证设备的正常运行。设备的故障可能会导致受伤或治疗效果不佳/不完全。

- 不要超过指定的时间:寻常疣20秒,跖疣40秒。将冷敷器放在普通疣或跖疣上时，不要过度施压。
- 如果手指或脚趾上有多个疣体，请一次治疗一个。在一个小区域内冷冻多个疣体可能会延迟愈合过程，或者该区域可能无法正常愈合。对任何剩余的疣体进行单独治疗，每次治疗间隔两周。
- 由于治疗而产生的疼痛/烧灼感通常在使用后几小时内消失。如果不舒适或疼痛/烧灼感持续超过这段时间，或者疼痛比预期强烈，请咨询医生。
- 不要将Trosyd Wortie与其他去除疣体的治疗方法同时使用，因为合并使用对皮肤的影响尚不明确。
- 不要吸入蒸汽/气溶胶，只在通风良好的地方使用。吸入蒸汽/气溶胶可能有毒性作用。

### I.治疗后的行为

- 保持治疗区域的清洁。
- 可以游泳和洗澡。
- 不要抓挠或划破治疗部位，因为可能会引起感染。
- 如果有必要，用纱布或无菌创可贴保护水泡。
- 不要刺破水泡。刺破水泡会很痛，并可能引起感染。
- 避免暴露在阳光下，或使用防晒霜(SPF值等于或大于30);尽可能避免治疗区域的任何创伤，直到完全愈合(即当疣体脱离，皮肤恢复正常颜色)。

### J.如果无法确定是否是疣，应该如何

Trosyd Wortie®只应在确定存在疣体的情况下使用。如果有疑问，请咨询医生。当将Trosyd Wortie®应用于非疣的皮肤新生物时，延迟适当的治疗可能会导致更严重的皮肤病或疾病。请仔细阅读“警告”和“禁忌症”。

### K.副作用

- 使用后，皮肤的颜色可能从白色变成红色。疣体下面可能会形成一个水泡，在几个小时内有疼痛/灼热的感觉是正常情况。如果这种感觉持续超过24小时，或出现任何其他问题(如:受影响区域外的冻伤或敏感性降低)，请尽快联系医生。该区域有几天比较敏感，属于正常情况。
- 疣体脱离后，可能会出现脱色现象或轻微的疤痕。
- 几天后，接受治疗的疣体中心可能出现一些黑点。
- 使用冷冻治疗产品来冷冻疣体，由于冷冻的温度很低，可能会造成轻微的烧伤。

### L.禁忌症

- 如果患有糖尿病或循环功能不良，请不要使用本产品。Trosyd Wortie®通过冷冻疣体发挥作用:如果患有糖尿病或循环系统问题，接受冷冻治疗的部位可能不会很快愈合，或只能部分愈合。
- 孕妇或哺乳期妇女请勿使用。
- 不要用于刺激性皮肤，受感染、发红的区域或出现炎症迹象的区域，如瘙痒或肿胀。有可能不是疣子的情况:如需进一步信息，请咨询医生。

### 警告

**极度易燃。**容器处于压力下。即使在使用后，也不要刺破或烧毁罐子。远离热量/火花/明火/白炽灯表面。请勿吸烟。不要喷到明火或其他火源上。不要暴露在50°C以上的温度下。保护该装置不受阳光照射，存放在阴凉、干燥的地方。刺破容器或将其暴露在高温下可能导致爆炸，造成严重伤害。**避免与眼睛接触。**与眼睛接触可能导致失明。将Trosyd Wortie®用在手上后，不要揉搓或触摸眼睛。如果接触到眼睛，用清水彻底冲洗15分钟，并立即寻求医疗帮助。用于外用。放在儿童接触不到的地方。儿童无法了解正确使用本产品的说明。

Trosyd Wortie®, 用于除疣，本产品含有:二甲醚



医疗器械

本说明书的最后一次修订:2020年三月

该产品可以使用到包装上和加压罐底部标明的有效日期。


欲了解更多信息，请访问[www.trosyd.it](http://www.trosyd.it)

制造商:

Trimb Healthcare, Barbara Strozziilaan 201,  
1083 HN Amsterdam, The Netherlands

独家经销商:

Giuliani Spa  
Via P. Palagi, 2, 20129 - Milano

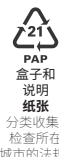

PAP  
盒子和  
说明  
纸张  
分类收集。  
检查所在  
城市的法规。