

说明书：给用户的信息

TROSYD®

指甲营养不良 点击笔

因外伤或银屑病引起的指甲变化

1%乙醇酸

甲基精氨

治疗指甲改变并防止复发

指甲营养不良症

指甲营养不良意指“指甲的改变”。它指的是指甲板正常形状的改变，也就是说，变得很脆，有剥落层，外观或颜色有变化。造成甲沟炎的原因可以是内源性的（如指甲基质或指甲周围结构的改变）和外源性的，即由外部原因造成的。后者中最常见的是**缺乏活性成分**，如矿物质，包括铁，对指甲的构成很有帮助；**或创伤事件**，即使轻微，但重复发生（微创伤），这可以在运动期间或由于长期使用过度挤脚的鞋而产生。因此，作为指甲改变的起因，不仅有霉菌（真菌）或细菌感染，为此，重要的是确定指甲外观改变的原因，并针对这一特定情况采取最正确的补救措施。


TROSYD® 指甲经营营养不良点击笔

TROSYD® 指甲经营营养不良点击笔属于医疗器材，适用于因外伤、银屑病以及活性成分缺乏和指甲基质受损而导致的指甲发黄、剥落和脱落的情况。由于其有效的配方，TROSYD® 指甲经营营养不良点击笔具有**双重效果**：

- 可促进甲板的愈合，因其能够深入重组指甲的角质形成
- 通过在甲板上形成一层保护膜，减少感染的风险，从而防止外部侵害

使用说明

在每次使用前，要清洁指甲并去除任何剩余的指甲油。然后按照下面的指示使用：

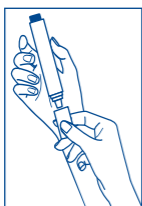

1) 取下点击笔的盖子



2) 把笔握住并按下笔顶部的按钮，直到刷子湿透。*



3) 将产品均匀分布在整个指甲表面和指甲边缘的下侧，轻轻按压。



4) 等待指甲变干（大约60-90秒），然后戴上手套，穿上袜子和/或鞋。

使用后，小心盖好，防止产品蒸发和刷子变硬。每周2次，每次1下，连续使用至少三个月。建议继续治疗周期，直到指甲完全愈合。

*首次使用时可能需要点击20次，而在笔启用之后点击1-2次即可。

储存条件

在室温下储存，放在阴凉干燥的地方，远离光源和热源。


警告

放在儿童接触不到的地方。仅供指甲局部使用。外用。请勿摄取。如果接触到眼睛，请彻底冲洗。请不要在包装上注明的有效期后使用本产品。有效期是指产品在完整的包装中，正确储存条件下的日期。如果对任何成分过敏，请勿使用。使用后小心再次盖好。如果出现异常反应，应停止治疗。如果包装被打开或损坏，请勿使用。

组成

甲基亚精胺，水，水解角蛋白，泛醇，甘醇酸；丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸铵共聚物，变性酒精。

更多信息：info@giulianipharma.com

 Labomar S.p.A.
Via Nazario Sauro 35 I
31036 Istrana (TV) - Italia

独家经销商: **Giuliani S.p.A.**
Via Pelagio Palagi, 2 - 20129 Milano (MI) - Italia



PAP

说明书

纸张

分类收集。

检查所在城市的規定。

2,5 ml    0477

修订：2020年十二月

